

*** για ανακοίνωση στον σταθμό ασθενοφόρων ***

Πληροφορίες για μη αντιληπτές διαρροές κατά τον αερισμό με MEDUMAT Standard²





Περιγραφή προβλήματος και αιτία

Κατά τον αερισμό ενός ασθενούς, μπορεί να προκύψουν διαρροές και αποσυνδέσεις. Αυτά μπορεί να προκληθούν από κίνηση και ακούσιο χειρισμό.

Λόγω διαρροών, ο ασθενής ενδέχεται να μην μπορεί να αεριστεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει ορίσει ο χρήστης. Λόγω αποσυνδέσεων στο αναπνευστικό κύκλωμα ή μεταξύ του αναπνευστικού εξοπλισμού και του ασθενούς, δεν εκτελείται αποτελεσματικός αερισμός. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απειλητική για τη ζωή σωματική βλάβη του ασθενούς.

Κατά τον αερισμό, μπορεί να προκύψουν διαρροές και αποσυνδέσεις στα ακόλουθα σημεία μεταξύ του αναπνευστικού εξοπλισμού και του ασθενούς:

- Διαρροή στον αερισμό με μάσκα
- Διαρροή στο βοήθημα αεραγωγών
- Διαρροή/Αποσύνδεση στο αναπνευστικό κύκλωμα π.χ.:
 - ο Σύνδεση για αναπνευστικό σωλήνα (Εικόνα 1)
 - ο Βύσμα σύνδεσης του συστήματος σωλήνων μέτρησης (Εικόνα 2)
 - ο Αναπνευστικός σωλήνας
 - ο Σωλήνας ελέγχου PEEP (Εικόνα 3)
 - ο Σωλήνας μέτρησης πίεσης (Εικόνα 3)
 - ο Αισθητήρας FlowCheck (Εικόνα 4)
 - ο Σωλήνας μέτρησης CO₂
 - ο Γωνιακό εξάρτημα (Εικόνα 4)
 - ο Φίλτρο αναπνευστικού συστήματος

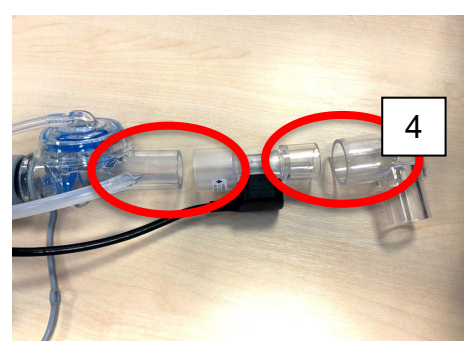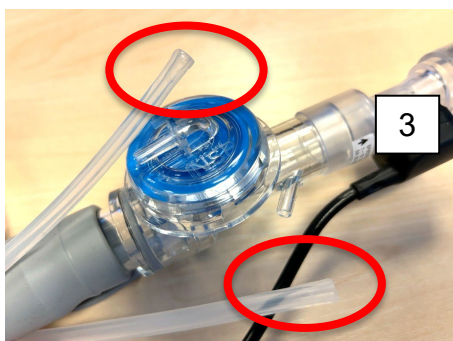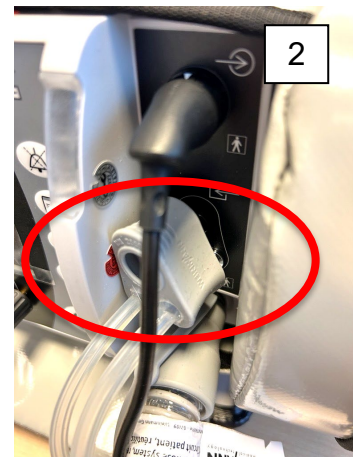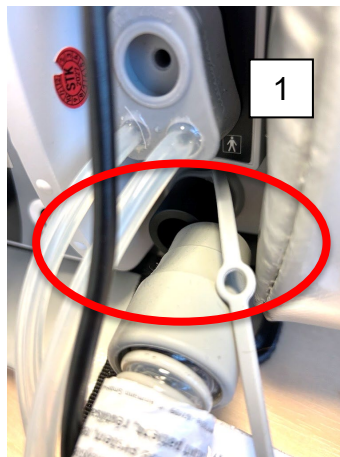

Μέτρα κατά τη διάρκεια του αερισμού

Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας στις οδηγίες χρήσης και εκτελείτε έλεγχο λειτουργίας πριν από κάθε χρήση.

Κατά τον αερισμό, προσέξτε για διαρροές και αποσυνδέσεις και οπωσδήποτε για συναγερμούς που τις υποδεικνύουν.

Ειδοποιήσεις για μεγάλη διαρροή ή απειλητική για τη ζωή αποσύνδεση μπορεί να παρέχει ο ακόλουθος **συναγερμός υψηλής προτεραιότητας (κόκκινο)**:

- Πίεση αεραγωγού χαμηλή



Ειδοποιήσεις για διαρροές ή απειλητική για τη ζωή αποσύνδεση μπορούν να παρέχουν οι ακόλουθοι **συναγερμοί υψηλής προτεραιότητας (κόκκινο)**:

- Άπνοια (σε μη επεμβατικό αερισμό)
- MVe χαμηλό (μόνο σε συσκευές με μέτρηση ροής)
- Διαρροή στην πλευρά ασθενούς (μόνο στην επιλογή CCSV)

Οι ακόλουθες τιμές μέτρησης μπορεί να υποδεικνύουν διαρροή ή αποσύνδεση:

- Χαμηλός ή μη εκπνεόμενος αναπνεόμενος όγκος (Vte)
- Χαμηλός ή μη εκπνεόμενος όγκος ανά λεπτό (MVe)
- Μικρή ή καμία αύξηση της πίεσης (καμπύλη πίεσης ή μανόμετρο)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης. Αυτές είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας www.weinmann-emergency.com.