

*** Notificación para el tablón de anuncios de los servicios de urgencia y rescate ***

Información sobre fugas inadvertidas durante la ventilación con MEDUMAT Standard²





Descripción del problema y causa

Durante la ventilación de un paciente pueden producirse fugas y desconexiones que pueden generarse por el movimiento y una manipulación involuntaria.

Las fugas pueden producir cambios en los parámetros de ventilación ajustados por el usuario y dar lugar a que el paciente no reciba la ventilación adecuada. No puede garantizarse una ventilación eficaz si se producen desconexiones en el circuito de ventilación o entre el dispositivo de ventilación y el paciente. Esto puede provocar lesiones potencialmente mortales al paciente.

Durante la ventilación pueden generarse fugas y desconexiones entre el dispositivo de ventilación y el paciente en los siguientes componentes:

- Fuga al aplicar ventilación con máscara
- Fuga en el dispositivo de vía aérea
- Fuga/desconexión en el circuito de ventilación, p. ej.:
 - Conexión para el tubo flexible para la ventilación (imagen 1)
 - Adaptador para circuito de ventilación reutilizable (imagen 2)
 - Tubo flexible para la ventilación
 - Tubo flexible para el control de la PEEP (imagen 3)
 - Tubo flexible para la medición de la presión (imagen 3)
 - Sensor FlowCheck (imagen 4)
 - Tubo flexible para la medición de CO₂
 - Pieza acodada (imagen 4)
 - Filtro para el sistema respiratorio

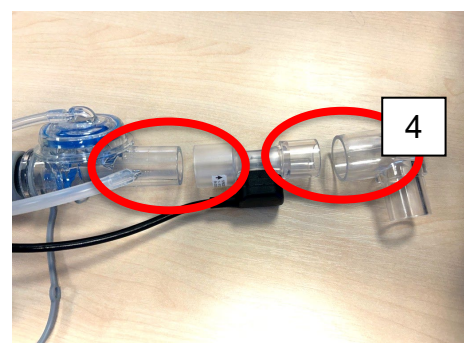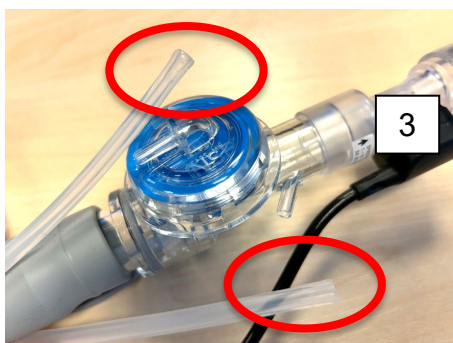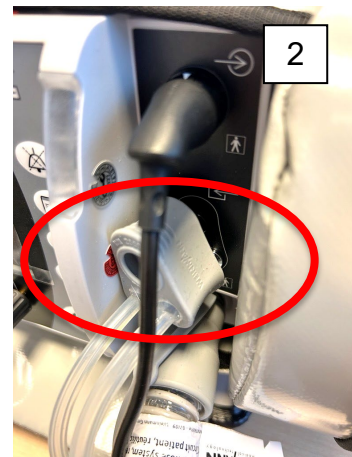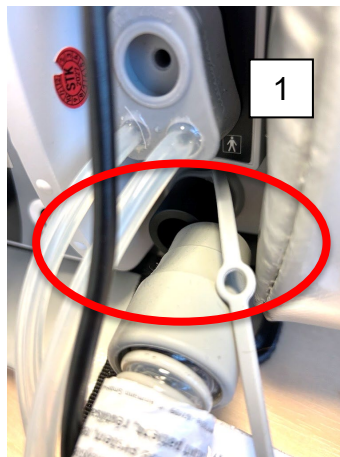

Procedimientos durante la ventilación

Observe las indicaciones de seguridad incluidas en las instrucciones de uso y realice un control de funcionamiento antes de cada uso.

Durante la ventilación, preste atención a posibles fugas o desconexiones, así como a alarmas que indiquen la presencia de las mismas.

La siguiente **alarma de alta prioridad (roja)** puede indicar una fuga significativa o una desconexión potencialmente mortal:

- Presión de las vías respiratorias baja



Además, las siguientes **alarmas de alta prioridad (rojas)** pueden indicar fugas o desconexiones potencialmente mortales:

- Apnea (durante la ventilación no invasiva)
- VMe bajo (únicamente en dispositivos con medición de flujo)
- Fuga en el lado del paciente (solo con la opción CCSV)

Los siguientes valores de medición pueden indicar una fuga o una desconexión:

- Volumen corriente espirado (Vte) bajo o nulo
- Volumen espiratorio por minuto (VMe) bajo o nulo
- Aumento de presión escaso o nulo (curva de presión o manómetro)

Encontrará más información al respecto en las instrucciones de uso.

También puede consultar las instrucciones de uso en nuestro sitio web www.weinmann-emergency.com/es.