

*** à afficher au poste de secours ***

Informations sur des fuites cachées pendant la ventilation avec MEDUMAT Standard²





Description du problème et origine

Il est possible que des fuites ou des déconnexions surviennent pendant la ventilation d'un patient. Elles peuvent résulter d'un mouvement ou d'une manipulation accidentelle.

Du fait de fuites, la ventilation du patient peut ne pas correspondre aux réglages effectués par l'utilisateur. Des déconnexions dans le circuit patient ou entre le ventilateur et le patient rendent impossible une ventilation efficace. Il peut en résulter des blessures potentiellement mortelles pour le patient.

Des fuites ou des déconnexions peuvent se produire pendant une ventilation aux points suivants entre le ventilateur et le patient :

- Fuite lors de la ventilation par masque
- Fuite sur l'accessoire pour voies respiratoires
- Fuite/déconnexion du circuit patient, p. ex. :
 - Raccord pour tuyau de ventilation (ill. 1)
 - Fiche de raccordement du système de tuyaux de mesure (ill. 2)
 - Tuyau de ventilation
 - Tuyau de commande PEP (ill. 3)
 - Tuyau de mesure de pression (ill. 3)
 - Capteur FlowCheck (ill. 4)
 - Tuyau de mesure de CO₂
 - Pièce coudé (ill. 4)
 - Filtre pour système respiratoire

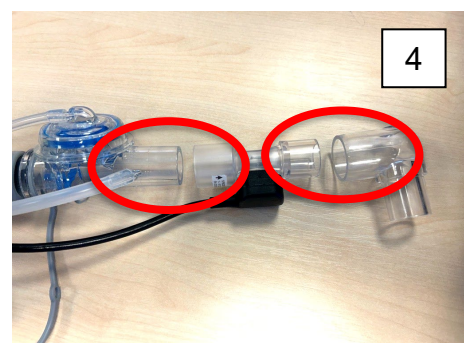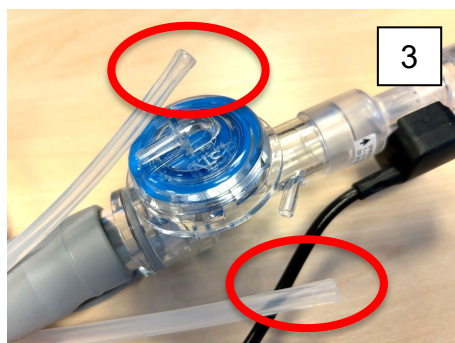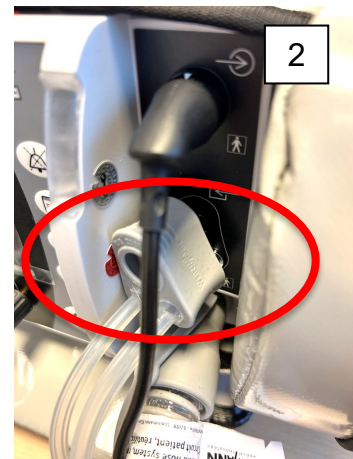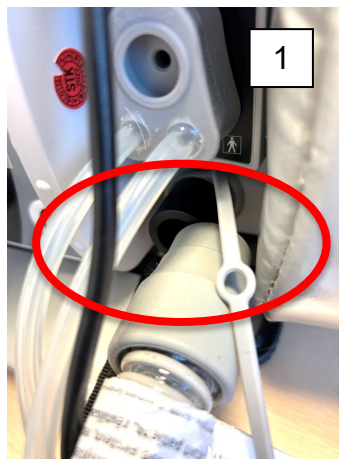

Mesures à prendre pendant la ventilation

Respecter les consignes de sécurité stipulées dans le mode d'emploi et effectuer un contrôle du fonctionnement avant chaque usage.

Prêter attention pendant la ventilation à d'éventuelles fuites ou déconnexions, et absolument à des alarmes signalant ce genre de perturbations.

L'**alarme de priorité élevée (rouge)** suivante peut signaler une fuite importante ou une déconnexion potentiellement mortelle :

- Pression des voies respiratoires basse



Les **alarmes de priorité élevée (rouge)** suivantes peuvent signaler des fuites importantes ou une déconnexion potentiellement mortelle :

- Apnée (en cas de ventilation non invasive)
- VMe bas (uniquement sur des appareils avec mesure de débit)
- Fuite côté patient (uniquement avec l'option CCSV)

Les valeurs de mesure suivantes peuvent attirer l'attention sur une fuite ou une déconnexion :

- Volume courant expiré (Vte) bas ou absent
- Volume expiratoire par minute (VMe) bas ou absent
- Montée en pression faible ou absente (courbe de pression ou manomètre)

Pour de plus amples informations se reporter au mode d'emploi de l'appareil.

Ce dernier peut également être consulté sur notre site Internet www.weinmann-emergency.com.