

*** להצגה בתחנת האמבולנסים ***

מידע על דליפה סמויה בזמן הנשמה עם MEDUMAT Standard²





תיאור הבעיה והסיבה

במהלך הנשמת המטופל, עלולים להיגרם דליפות וניתוקים. אלה עשויים להיגרם כתוצאה מתנועה או מפעולה בלתי מכוונת.

דליפות עלולות למנוע מהמטופל לקבל את ההנשמה שהוגדרה על ידי המשתמש אם אירע ניתוק במערכת צינור המטופל או בין מכונת ההנשמה למטופל, לא ניתן לספק הנשמה יעילה. מצב זה עלול לחשוף את המטופל לפציעות מסכנות חיים.

במהלך ההנשמה, ייתכנו דליפות וניתוקים בנקודות הבאות בין מכונת ההנשמה למטופל:

- דליפה בזמן הנשמת מסכה
- דליפה במכשיר נתיב האוויר
- דליפה או ניתוק במערכת צינור המטופל כגון:
 - חיבור עבר צינור הנשמה (איור 1)
 - מחבר מעגל המדידה (איור 2)
 - צינור ההנשמה
 - צינור בקרת PEEP (איור 3)
 - צינור מדידת לחץ (איור 3)
 - חיישן FlowCheck (איור 4)
 - צינור מדידת CO₂
 - מחבר זוויתי (איור 4)
 - מסנן מערכת הנשימה

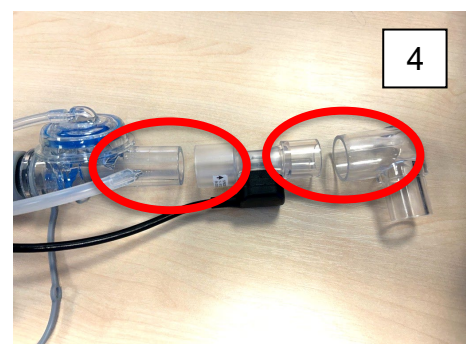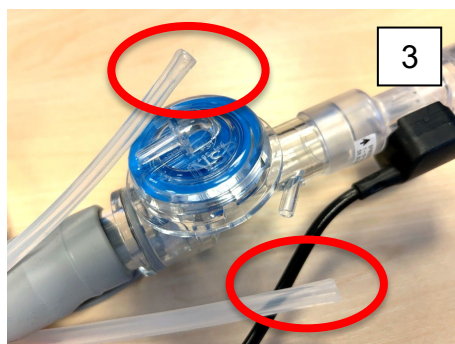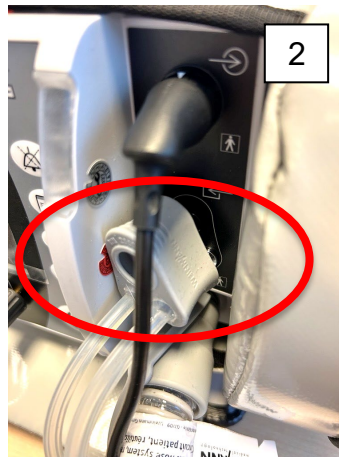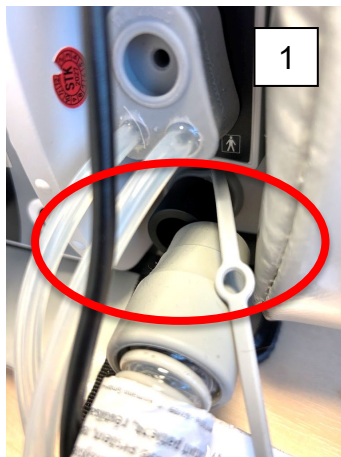

אמצעים במהלך הנשמה

יש לציית למידע הבטיחות בהוראות השימוש ולבצע בדיקת תפקוד לפני כל שימוש.

במהלך הנשמה, יש לבדוק לאיתור דליפות וניתוקים ולשים לב במיוחד לכל התראה המציינת בעיות אלה.

התראה חמורה זו (אדום) עשויה לציין דליפה חמורה או ניתוק מסכן חיים:

- לחץ דרכי האוויר נמוך



התראות חמורות אלה (אדום) עשויים גם לציין דליפות חמורה או ניתוקים מסכני חיים:

- דום נשימה (בזמן הנשמה לא חודרנית)
- MVe נמוך (רק מכשירים עם מדידת זרם)
- דליפה בצד המטופל (רק עם אפשרות CCSV)

הערכים הנמדדים הבאים עשויים לציין דליפה או ניתוק:

- נפח חליפי נשיפתי נמוך או לא קיים (Vte)
- נפח נשיפה לדקה נמוך או לא קיים (MVe)
- עליית לחץ מזערית או לא קיימת (בעקומת הלחץ או במד הלחץ)

למידע נוסף, יש לעיין בהוראות השימוש.

מידע זה זמין גם באתר האינטרנט שלנו www.weinmann-emergency.com