

*** ** Per l'affissione alla stazione di partenza dei mezzi di soccorso **

Informazioni sulle perdite non rilevate durante la ventilazione con MEDUMAT Standard²





Descrizione del problema e causa

Durante la ventilazione di un paziente possono verificarsi perdite e disconnessioni. Queste possono essere causate da manovre o manipolazioni accidentali.

Le perdite possono impedire che il paziente venga ventilato secondo i parametri impostati dall'utilizzatore. In caso di disconnessione nel circuito paziente o tra il ventilatore e il paziente, la ventilazione risulterà totalmente inefficace. Ciò può causare al paziente lesioni potenzialmente mortali.

Durante la ventilazione, possono verificarsi perdite e disconnessioni tra il ventilatore e il paziente nei seguenti punti:

- Perdite nella ventilazione mediante maschera
- Perdite in corrispondenza dei presidi per le vie aeree
- Perdite/disconnessioni nel circuito paziente, ad esempio:
 - attacco del tubo di ventilazione (Figura 1)
 - raccordo del sistema di tubi di misurazione (Figura 2)
 - tubo di ventilazione
 - tubo di comando PEEP (Figura 3)
 - tubo di misurazione della pressione (Figura 3)
 - sensore FlowCheck (Figura 4)
 - tubo di misurazione della CO₂
 - raccordo a gomito (Figura 4)
 - filtro per sistema respiratorio

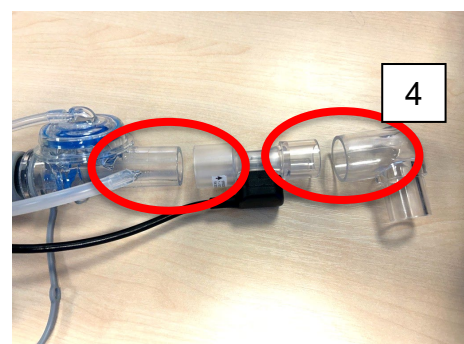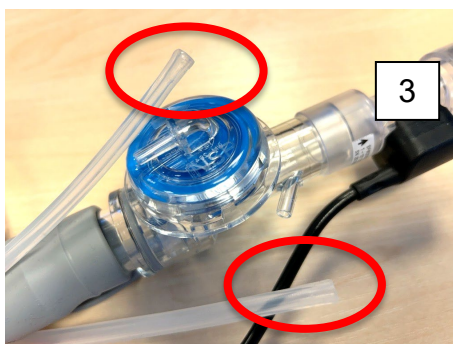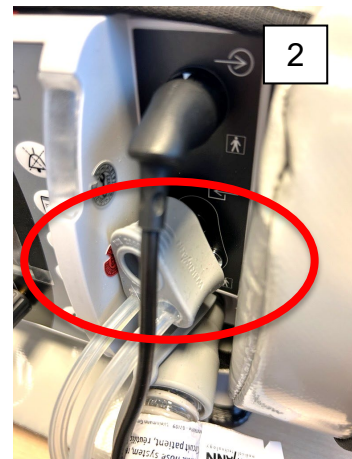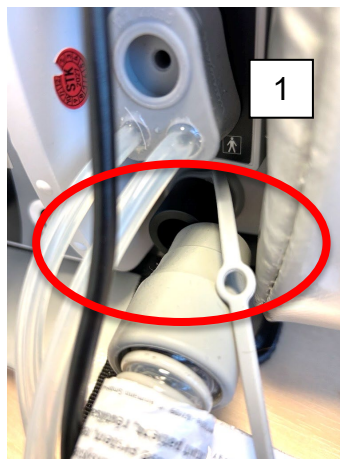

Misure adottate durante la ventilazione

Osservare le avvertenze di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso ed effettuare un controllo funzionale prima di ogni utilizzo.

Durante la ventilazione, prestare attenzione a perdite e disconnessioni, monitorando con la massima priorità gli allarmi che le segnalano.

Il seguente **allarme ad alta priorità (rosso)** può segnalare una grande perdita o una disconnessione pericolosa per la vita:

- Pressione vie respiratorie bassa



Inoltre, i seguenti **alarmi ad alta priorità (rosso)** possono indicare perdite o una disconnessione pericolosa per la vita:

- Apnea (in caso di ventilazione non invasiva)
- MVe basso (solo per dispositivi con misurazione del flusso)
- Perdite lato paziente (solo con opzione CCSV)

I seguenti valori misurati possono indicare una perdita o una disconnessione:

- Volume corrente espiratorio (Vte) basso o assente
- Volume minuto espiratorio (MVe) basso o assente
- Accumulo di pressione scarso o assente (curva di pressione o manometro)

Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili nelle istruzioni per l'uso.

Queste sono disponibili anche tramite il nostro sito web www.weinmann-emergency.com.