

Informacija apie nepastebėtus nuotėkius ventiliacijos metu, kai naudojamas ventiliatorius „MEDUMAT Standard²“





Problemos aprašymas ir priežastis

Ventiliacijos taikymo pacientui metu gali įvykti nuotėkių ir jungčių atsijungimų. Jie gali atsirasti dėl judesių ir netyčinio manipuliavimo.

Dėl nuotėkių gali atsirasti taip, kad paciento nebus galima ventiliuoti taip, kaip nustatė naudotojas. Dėl jungčių atsijungimų paciento kvėpavimo kontūre arba tarp ventiliatoriaus ir paciento nevyksta efektyvus dirbtinis kvėpavimas. Dėl to pacientui gali kilti gyvybei pavojingų sužalojimų.

Ventiliacijos taikymo metu toliau nurodytuose taškuose tarp paciento ir ventiliatoriaus gali įvykti nuotėkių ir jungčių atsijungimų:

- Nuotėkis, kai ventiliacijai naudojama kvėpavimo kaukė
- Nuotėkis kai naudojama kvėpavimo takų priemonė
- Nuotėkis / jungčių atsijungimas paciento kvėpavimo kontūre, pvz.:
 - Ventiliacijos žarnos jungtis (1 pav.)
 - Matavimo žarnų sistemos jungiamasis kištukas (2 pav.)
 - Ventiliacijos žarna
 - PEEP valdymo žarna (3 pav.)
 - Slėgio matavimo žarna (3 pav.)
 - Jutiklis „FlowCheck“ (4 pav.)
 - CO₂ matavimo žarna
 - Kampinė detalė (4 pav.)
 - Kvėpavimo sistemos filtras

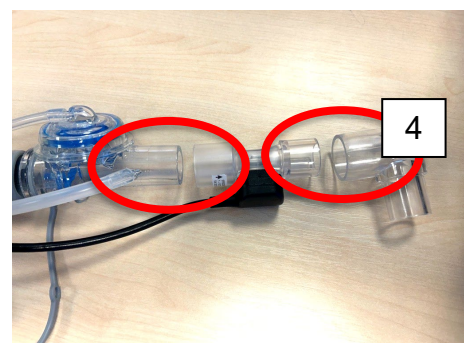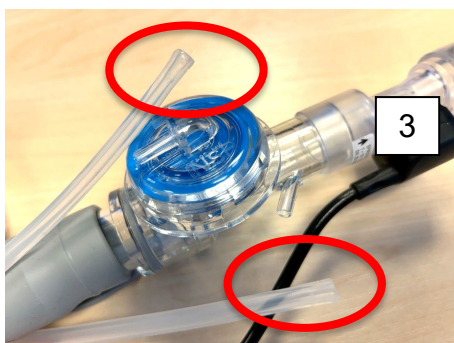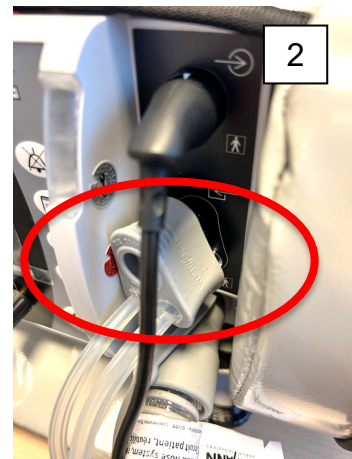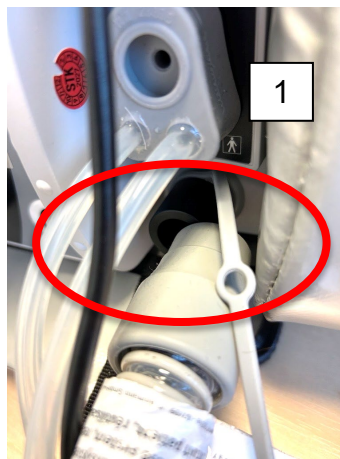

Priemonės ventiliacijos metu

Laikytės naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos nurodymų ir prieš kiekvieną naudojimą atlikite veikimo patikrą.

Ventiliacijos metu atkreipkite dėmesį į nuotėkius ir jungčių atsijungimus bei būtinai stebėkite apie tai įspėjančius įspėjimo signalus.

Apie didelį nuotėkį arba gyvybei pavojingą jungčių atsijungimą gali įspėti šis **didelio prioriteto įspėjimo signalas (raudonas)**:

- Žemas kvėpavimo takų slėgis



Apie nuotėkius arba gyvybei pavojingą jungčių atsijungimą gali įspėti šie **didelio prioriteto įspėjimo signalai (raudoni)**:

- Apnėja (neinvazinės ventiliacijos metu)
- Žemas MVe (tik prietaisuose su srauto matavimo funkcija)
- Nuotėkis paciento pusėje (tik su CCSV parinktimi)

Toliau pateiktos matavimų vertės gali būti įspėjimas apie nuotėkį arba jungčių atsijungimą:

- Mažas arba nulinis iškvėpimo kvėpuojamasis tūris (Vte)
- Mažas arba nulinis iškvėpimo minutinis tūris (MVe)
- Nedidelis arba nulinis slėgio kilimas (pagal slėgio kreivę arba manometrą)

Daugiau informacijos rasite naudojimo instrukcijoje.

Ją taip pat galite atsisiųsti iš mūsų interneto svetainės www.weinmann-emergency.com.