

*** de afișat la stația de salvare ***

Informare privind scurgerile neobservate în timpul ventilării cu MEDUMAT Standard²





Descrierea problemei și cauza

În timpul ventilării unui pacient se poate ajunge la scurgeri și deconectări. Acestea pot apărea din cauza mișcării și a manipulării neintenționate.

Din cauza scurgerilor se poate întâmpla ca pacientul să nu fie ventilat conform setărilor făcute de utilizator. Din cauza deconectărilor în sistemul de furtunuri pacient sau între aparatul de ventilație și pacient nu are loc o ventilație eficientă. Acest lucru poate provoca leziuni care pun viața pacientului în pericol.

În timpul unei ventilări sunt posibile scurgeri și deconectări în următoarele puncte între aparatul de ventilație și pacient:

- Scurgere la ventilația cu mască
- Scurgere la dispozitivul de asistare a căilor respiratorii
- Scurgere/deconectare la sistemul de furtunuri pacient, de ex.:
 - Racord pentru furtun de ventilație (figura 1)
 - Conector de racord sistem de furtunuri de măsură (figura 2)
 - Furtun de ventilație
 - Furtun de comandă PEEP (figura 3)
 - Furtun de măsurare presiune (figura 3)
 - Senzor FlowCheck (figura 4)
 - Furtun de măsurare CO₂
 - Piesă unghiulară (figura 4)
 - Filtru de sistem respirator

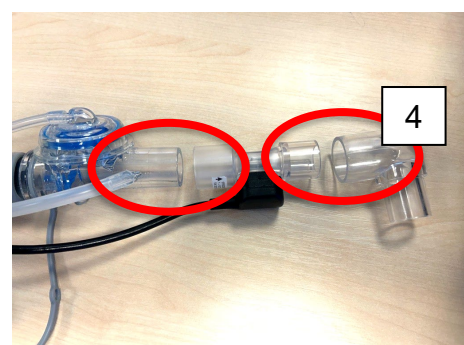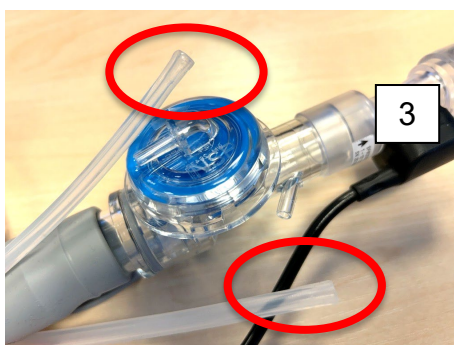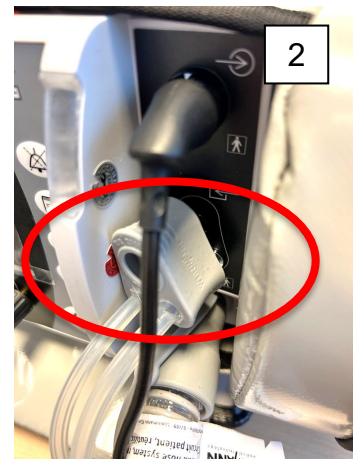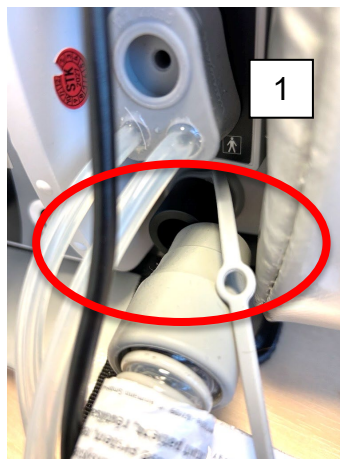

Măsuri în timpul ventilației

Respectați indicațiile privind siguranța din instrucțiunile de utilizare și realizați o verificare funcțională înainte de fiecare utilizare.

În timpul ventilării, acordați atenție scurgerilor și deconectărilor, precum și alarmelor care semnalează scurgeri și deconectări.

O scurgere mare sau o deconectare care pune viața pacientului în pericol poate fi semnalată de următoarea **alarmă de prioritate ridicată (roșu)**:

- Presiune căi respiratorii scăzută



Scurgeri sau o deconectare care pune viața pacientului în pericol pot fi semnalate în plus de următoarele **alarme de prioritate ridicată (roșu)**:

- Apnee (la ventilare non-invazivă)
- MVe scăzută (numai la aparatele cu măsurarea debitului)
- Pierderi pe partea pacientului (numai la opțiunea CCSV)

Următoarele valori măsurate pot semnala o scurgere sau o deconectare:

- Volum expirator tidal (Vte) scăzut sau absent
- Volum expirator pe minut (MVe) scăzut sau absent
- Creștere redusă sau inexistentă a presiunii (curbă de presiune sau manometru)

Mai multe informații în această privință găsiți în instrucțiunile de utilizare. Acestea se pot accesa și pe pagina noastră web www.weinmann-emergency.com.