

*** za izobešanje obvestila na reševalni postaji ***

Informacije o neopaženih uhajanjih med predihavanjem z MEDUMAT Standard²





Opis težave in vzrok

Med predihavanjem pacienta lahko pride do uhajanj in odklopov. Nastanejo lahko na podlagi premikanja in nenamerne manipulacije.

Na podlagi uhajanj lahko pride do tega, da pacienta ni mogoče predihavati z uporabnikovimi nastavitvami. Zaradi odklopov v dihalnem krogotoku ali med ventilatorjem in pacientom se ne izvaja učinkovito predihavanje. To lahko pri pacientu povzroči smrtno nevarne poškodbe.

Med predihavanjem lahko na naslednjih točkah med ventilatorjem in pacientom pride do uhajanj in odklopov:

- Uhajanje pri predihavanju z masko
- Uhajanje pri pripomočkih za dihalne poti
- Uhajanje/odklop na dihalnem krogotoku, npr.:
 - Prikluček za gibko cevko za predihavanje (slika 1)
 - Priključni vtič sistema merilnih cevi (slika 2)
 - Gibka cevka za predihavanje
 - Krmilna cevka PEEP (slika 3)
 - Tlačna merilna cevka (slika 3)
 - Senzor FlowCheck (slika 4)
 - Merilna cevka CO₂
 - Kotnik (slika 4)
 - Filter dihalnega sistema

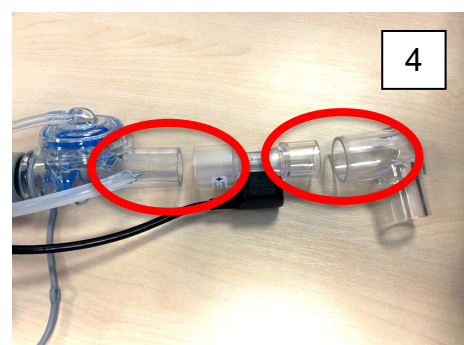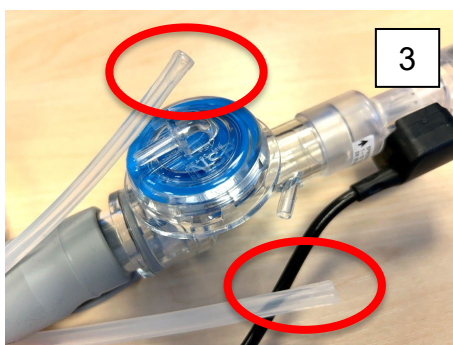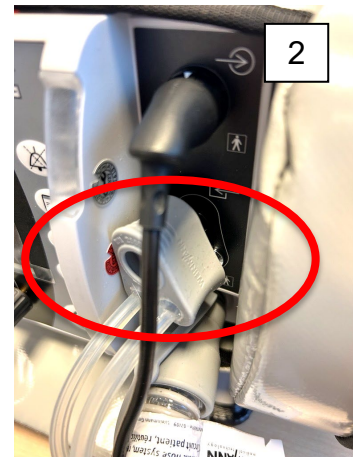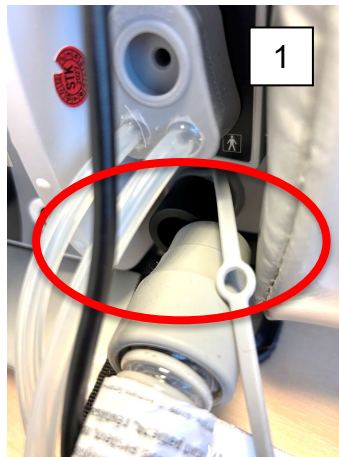

Ukrepi med predihavanjem

Upoštevajte varnostne napotke v navodilih za uporabo in pred vsako uporabo izvedite preverjanje delovanja.

Med predihavanjem bodite pozorni na uhajanja in odklope ter obvezno na alarme, ki opozarjajo nanje.

Napotke glede obsežnega uhajanja ali smrtno nevarnih odklopov lahko zagotovi naslednji **alarm z visoko prednostjo (rdeč)**:

- Tlak v dihalnih potek je nizek



Napotke glede uhajanj ali smrtno nevarnih odklopov lahko zagotovijo naslednji **alarmi z visoko prednostjo (rdeč)**:

- Apneja (pri neinvazivnem predihavanju)
- Nizek MVe (le pri napravah z merjenjem pretoka)
- Uhajanje na strani pacienta (le pri opciji CCSV)

Naslednje merilne vrednosti lahko nakazujejo uhajanje ali odklop:

- Nizek ekspiracijski dihalni volumen ali njegova odsotnost (Vte)
- Nizek ekspiracijski minutni volumen ali njegova odsotnost (MVe)
- Majhna vzpostavitev tlaka ali njena odsotnost (tlačna krivulja ali manometer)

Nadaljnje informacije o tem so na voljo v navodilih za uporabo.

Priklicati jih je mogoče tudi na našem spletnem mestu www.weinmann-emergency.com.