

*** për postim në stacionin e shpëtimit ***

Informacion mbi rrjedhjet e pavërejtura gjatë ventilimit me MEDUMAT Standard²





Përshkrimi i problemit dhe shkaku

Gjatë ventilimit të një pacienti, mund të ndodhin rrjedhje dhe shkëputje. Këto mund të lindin nga lëvizja dhe manipulimi i paqëllimshëm.

Rrjedhjet mund të bëjnë që pacienti të mos ventilohet siç është vendosur nga përdoruesi. Për shkak të shkëputjeve në sistemin e tubave ose midis ventilatorit dhe pacientit, nuk kryhet ajrim efikas. Kjo mund ta dëmtojë pacientin në një mënyrë kërcënuese për jetën.

Gjatë ventilimit, rrjedhjet dhe shkëputjet mund të ndodhin në pikat e mëposhtme midis ventilatorit dhe pacientit:

- Rrjedhje gjatë ajrimit me maskë
- Rrjedhje në pajisjen e rrugëve të frymëmarrjes
- Rrjedhje/shkëputje në sistemin e tubave, p.sh.:
 - Lidhja për tubin e ventilimit (Figura 1)
 - Konektori i sistemit të tubit të matjes (Figura 2)
 - Tubi i ventilimit
 - Tubi i kontrollit PEEP (Figura 3)
 - Tubi për matjen e presionit (Figura 3)
 - Sensori FlowCheck (Figura 4)
 - Tubi i matjes së CO₂
 - Kundërkëndi (Figura 4)
 - Filtri i sistemit të frymëmarrjes

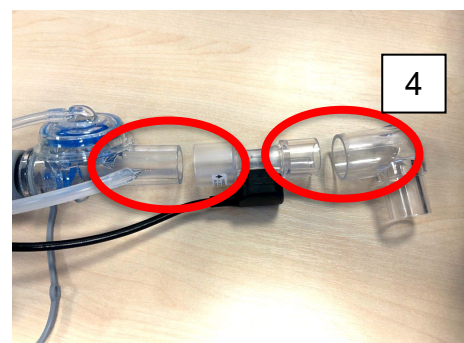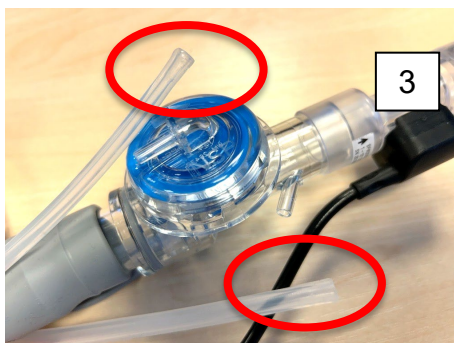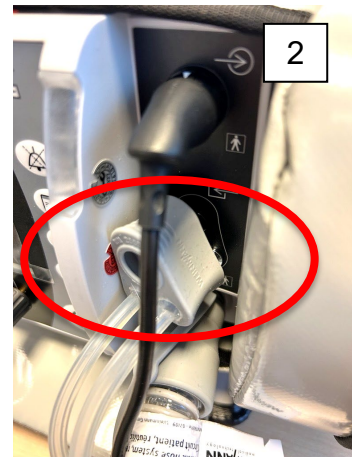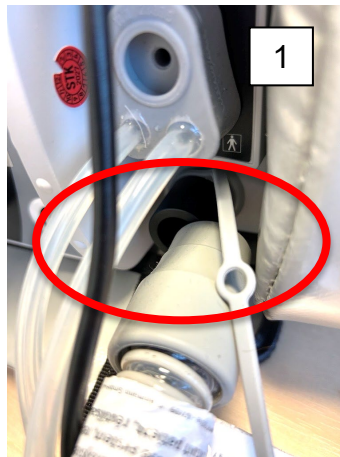

Masat gjatë ventilimit

Ndiqui udhëzimet e sigurisë në manualin e përdorimit dhe kryeni një kontroll funksioni para çdo përdorimi.

Gjatë ajrimit, kushtojini vëmendje rrjedhjeve dhe shkëputjeve, si dhe doemos alarmeve që i tregojnë këto.

Indikacionet e një rrjedhjeje të madhe ose një shkëputjeje kërcënuese për jetën mund të shkaktojnë **alarmin e mëposhtëm me përparësi të lartë (të kuq)**:

- Presioni i ulët i rrugëve të frymëmarrjes



Treguesit e rrjedhjeve ose shkëputjeve që kërcënojnë jetën mund të shkaktojnë gjithashtu **alarmet e mëposhtme me përparësi të lartë (të kuqe)**:

- Apnea (me ventilim joinvaziv)
- MVe i ulët (vetëm për pajisjet me matje të rrjedhjes)
- Rrjedhje nga ana e pacientit (vetëm me opsionin CCSV)

Matjet e mëposhtme mund të tregojnë një rrjedhje ose shkëputje:

- Vëllim ekspirator Tidal i ulët ose aspak (Vte)
- Vëllim ekspirator Minute i ulët ose aspak (MVe)
- Pak ose aspak rritje e presionit (kurba e presionit ose manometri)

Mund të gjeni më shumë informacion rreth kësaj në manualin e udhëzimeve.

Kjo është gjithashtu e disponueshme në faqen tonë të internetit www.weinmann-emergency.com.