

*** สำหรับการแสดงผลในสถานรพพยาบาล ***

ข้อมูลเกี่ยวกับการรั่วไหลที่ตรวจไม่พบระหว่างการช่วยหายใจด้วย MEDUMAT Standard²





คำอธิบายปัญหาและสาเหตุ

ระหว่างการช่วยหายใจผู้ป่วย อาจเกิดการรั่วไหลและการหลุดแยกการเชื่อมต่อได้
สิ่งเหล่านี้อาจเกิดจากการเคลื่อนไหวหรือการสัมผัสปรับเปลี่ยนโดยไม่ตั้งใจ

การรั่วไหลอาจป้องกันไม่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยหายใจตามที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้
หากเกิดการหลุดในวงจรการหายใจหรือระหว่างเครื่องช่วยหายใจและผู้ป่วย จะไม่สามารถส่งการช่วยหายใจที่มีประสิทธิภาพได้
สิ่งนี้อาจทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่คุกคามชีวิต

ระหว่างการช่วยหายใจ อาจเกิดการรั่วไหลและการหลุดแยกการเชื่อมต่อได้ที่จุดต่อไปนี้ระหว่างเครื่องช่วยหายใจกับผู้ป่วย:

- การรั่วไหลระหว่างการช่วยหายใจด้วยหน้ากาก
- การรั่วไหลในอุปกรณ์ทางเดินหายใจ
- การรั่วหรือการหลุดออกที่วงจรการหายใจ เช่น
 - จุดเชื่อมต่อท่อช่วยหายใจ (ภาพ 1)
 - ตัวเชื่อมต่อวงจรการวัด (ภาพ 2)
 - ท่อช่วยหายใจ
 - ท่อควบคุม PEEP (ภาพ 3)
 - ท่อวัดความดัน (ภาพ 3)
 - เซ็นเซอร์ FlowCheck (ภาพ 4)
 - ท่อวัด CO₂
 - ข้องอ (ภาพ 4)
 - ตัวกรองระบบการหายใจ

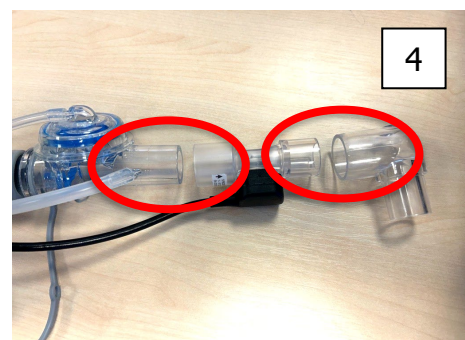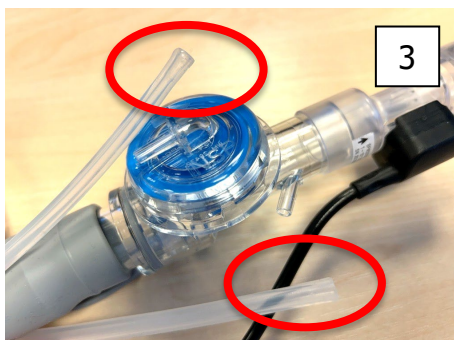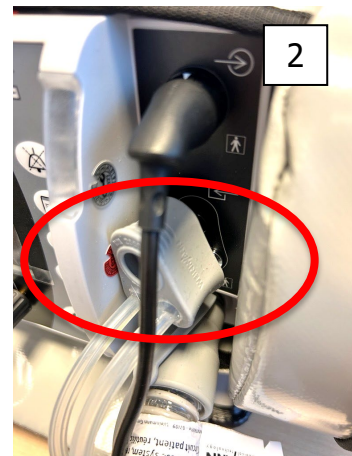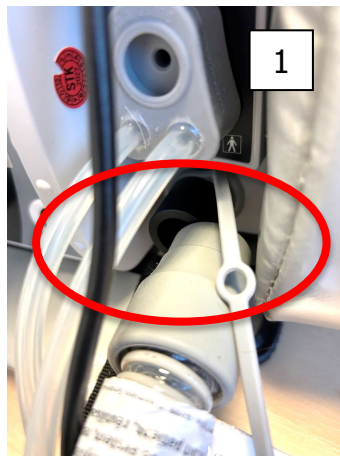

มาตรการระหว่างการช่วยหายใจ

สังเกตข้อมูลความปลอดภัยในคู่มือการใช้งานและทำการตรวจสอบการทำงานก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง

ระหว่างการช่วยหายใจ ให้สังเกตการรั่วไหลและการหลุด และให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับสัญญาณเตือนใดๆ ที่บ่งชี้ถึงปัญหาเหล่านี้

สัญญาณเตือนลำดับความสำคัญสูง (สีแดง) ต่อไปนี้อาจบ่งชี้ถึงการรั่วไหลรุนแรงหรือการหลุดที่คุกคามชีวิต:

- แรงดันในทางเดินหายใจ ต่ำ



สัญญาณเตือนลำดับความสำคัญสูง (สีแดง) ต่อไปนี้อาจบ่งชี้ถึงการรั่วไหลหรือการหลุดที่คุกคามชีวิตเช่นกัน:

- ภาวะหยุดหายใจ (ระหว่างการช่วยหายใจแบบไม่รุกราน)
- MVE ต่ำ (เฉพาะอุปกรณ์ที่มีการวัดการไหลเท่านั้น)
- การรั่วที่ด้านผู้ป่วย (เฉพาะเมื่อมีตัวเลือก CCSV เท่านั้น)

ค่าที่วัดได้ต่อไปนี้อาจบ่งชี้ถึงการรั่วไหลหรือการหลุดการเชื่อมต่อ:

- ปริมาตรลมหายใจออกต่อครั้ง (Vte) ต่ำหรือไม่มีเลย
- ปริมาตรลมหายใจออกต่อนาที (MVe) ต่ำหรือไม่มีเลย
- มีการสร้างความดันขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (กราฟความดันหรือมาตรวัดความดัน)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำการใช้งาน

ข้อมูลนี้ยังมีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา www.weinmann-emergency.com.