

*** Kurtarma istasyonundaki duyuru panosuna asılmak üzere ***

MEDUMAT Standard² ile solutma sırasında fark edilmeyen kaçaklara ilişkin bilgi





Sorun tanımı ve nedeni

Bir hastanın solutulması sırasında kaçaklar ve bağlantı kopmaları meydana gelebilir. Bunlar hareket veya istem dışı yapılan müdahaleler sonucunda oluşabilir.

Kaçaklar, hastaya kullanıcı tarafından ayarlandığı şekilde solunum desteği verilememesine neden olabilir. Hortum sistemi veya hasta ile solunum cihazı arasında bağlantı kopması durumunda etkin bir solutma gerçekleşmez. Bu durum hasta için hayati tehlike oluşturabilir.

Solutma sırasında solunum cihazı ile hasta arasında aşağıdaki noktalarda kaçaklar ve bağlantı kopmaları meydana gelebilir:

- Maskeli solutmada kaçak
- Solunum yolu yardımcı ekipmanında kaçak
- Hortum sisteminde kaçak/bağlantı kopması, örn:
 - Solutma hortumu bağlantısı (Resim 1)
 - Ölçme hortum sistemi bağlantı soketi (Resim 2)
 - Solutma hortumu
 - PEEP kontrol hortumu (Resim 3)
 - Basınç ölçme hortumu (Resim 3)
 - FlowCheck sensörü (Resim 4)
 - CO₂ ölçme hortumu
 - Dirsek parçası (Resim 4)
 - Solunum sistemi filtresi

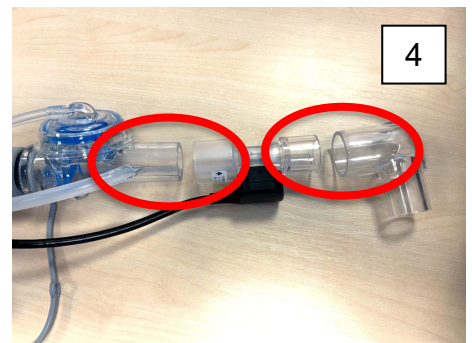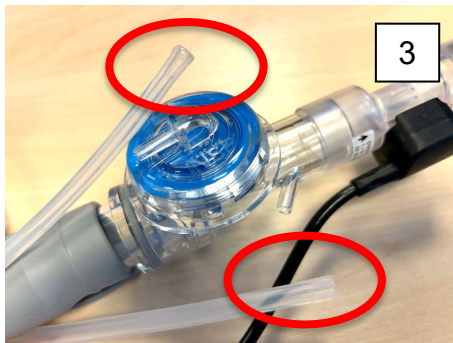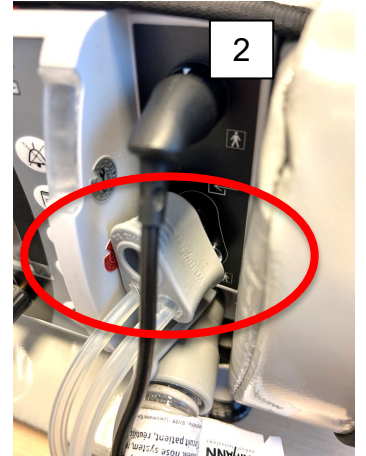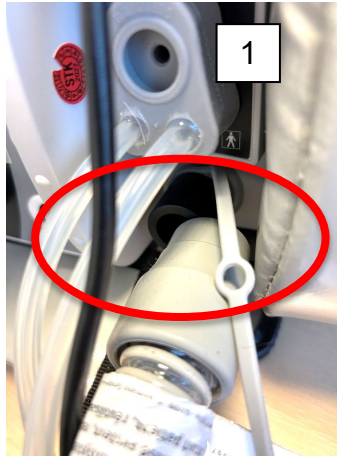

Solutma sırasında alınacak önlemler

Kullanma talimatındaki güvenlik uyarılarını dikkate alın ve her kullanımdan önce işlev kontrolü gerçekleştirin.

Solutma sırasında kaçaklara ve bağlantı kopmalarına, ayrıca bunlara işaret eden alarmlara mutlaka dikkat edin.

Aşağıdaki **yüksek öncelikli alarm (kırmızı)** büyük bir kaçağa veya hayati tehlike oluşturan bir bağlantı kopmasına işaret edebilir:

- Solunum yolu basıncı düşük



Kaçaklara veya hayati tehlike oluşturan bağlantı kopmalarına aşağıdaki **yüksek öncelikli alarmlar (kırmızı)** da işaret edebilir:

- Apne (noninvaziv solutmada)
- MVe düşük (yalnızca akış ölçümü bulunan cihazlarda)
- Hasta tarafında hava kaçağı (yalnızca CCSV seçeneğinde)

Aşağıdaki ölçüm değerleri bir kaçağa veya bağlantı kopmasına işaret edebilir:

- Ekspiratuvar tidal hacmin düşük veya hiç olmaması (Vte)
- Ekspiratuvar dakika hacmin düşük veya hiç olmaması (MVe)
- Az veya hiç basınç oluşumu olmaması (basınç eğrisi veya manometre)

Daha fazla bilgi için kullanma talimatına bakın.

Kullanma talimatına web sitemiz üzerinden de ulaşabilirsiniz: www.weinmann-emergency.com