

*** 用作救护站告示 ***

关于使用 MEDUMAT Standard² 通气期间未被察觉泄漏的说明





问题说明与产生原因

为患者通气期间，可能发生泄漏和断开连接。这些情况可能因移动和意外操作而产生。

泄漏可能导致患者无法按照用户所设参数进行通气。呼吸管路内或呼吸机与患者之间的断开连接会导致无法进行有效通气。这可能对患者造成危及生命的伤害。

在通气期间，呼吸机与患者之间的以下部位可能发生泄漏和断开连接：

- 面罩通气泄漏
- 呼吸道辅助装置处泄漏
- 呼吸管路泄漏 / 断开连接，例如：
 - 通气管接口 (图 1)
 - 测量软管系统的插头 (图 2)
 - 通气管
 - PEEP 控制软管 (图 3)
 - 测压软管 (图 3)
 - FlowCheck 传感器 (图 4)
 - CO₂ 测量软管
 - 弯角件 (图 4)
 - 呼吸系统滤片

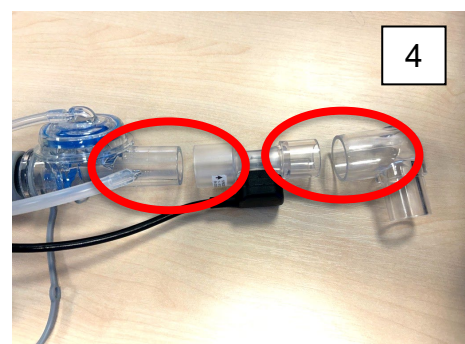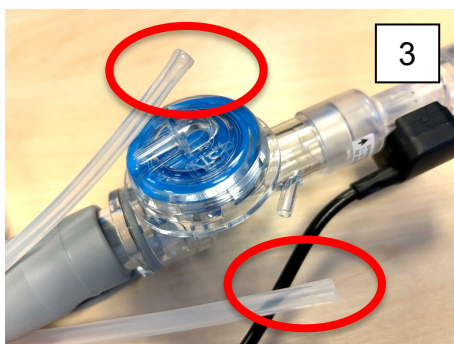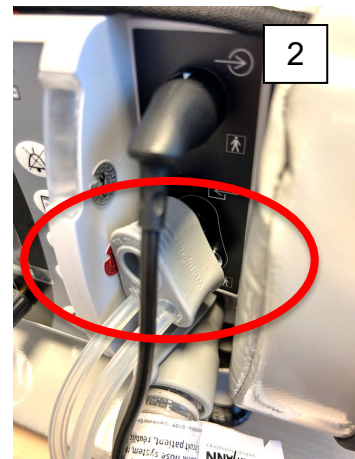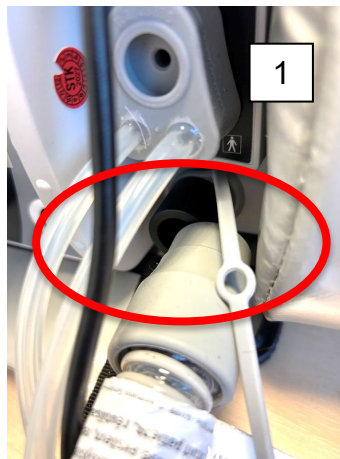

通气期间的注意事项

请遵守使用说明书中的安全提示，并在每次使用前进行功能检查。

在通气期间，请留意泄漏和断开连接，并务必关注指示这些情况的警报。

以下**高优先级警报（红色）**可能提示存在严重泄漏或危及生命的断开连接：

- 气道压力低



此外，以下**高优先级警报（红色）**也可能提示存在泄漏或危及生命的断开连接：

- 呼吸暂停（无创通气时）
- MVe 低（仅适用于带有流量测量的设备）
- 患者侧泄漏（仅限 CCSV 选项时）

以下测量值可能提示存在泄漏或断开连接：

- 呼气潮气量 (Vte) 低或无显示
- 每分钟呼出气量 (MVe) 低或无显示
- 压力积聚少或无压力积聚（压力曲线或压力表）

更多相关信息请查看使用说明书。

该说明书也可通过我们的网站 www.weinmann-emergency.com 获取。